

LÖWENSTEIN
medical



JULIA



JULIA Full Face

JULIA



Mehr Raum für Träume.

JULIA

Die Freiheitsliebenden.

Der Schlaf ist etwas sehr Persönliches. Jeder Mensch hat eigene Gewohnheiten und Rituale, um den Tag ausklingen zu lassen. Damit die Schlafatemtherapie ihre volle Wirkung entfalten kann, sollte sie sich möglichst mühelos in den Alltag einfügen.

Dafür eröffnet die JULIA-Familie neue Möglichkeiten. Dank des Designs ohne Stirnstütze können Anwender*innen sowohl mit der Nasalmaske als auch mit der Mund-Nasen-Maske bequem auf der Seite schlafen und während der Therapie ihre Brille tragen.

Bewährte Passform, neuer Komfort

Für die JULIA-Familie wurden bewährte Merkmale bestehender Masken weiterentwickelt. Die Nasalmaske übernimmt die ausgezeichnete Passform der CARA und die JULIA Full Face ist mit dem bekannten LENA-Maskenkissen ausgestattet. Das Ergebnis ist ein angenehmer Sitz und eine zuverlässige Abdichtung bei beiden Maskenvarianten.

Freies Sichtfeld für Brillenträger*innen und Seitenschläfer*innen

Eine Neuheit der JULIA-Familie ist das freie Sichtfeld ohne Stirnstütze. So lassen sich vertraute Abendrituale wie Lesen, Fernsehen oder ein Blick aufs Smartphone ganz selbstverständlich mit der Therapie verbinden. Gleichzeitig sorgt die Konstruktion für hohen Komfort in Seitenlage, da nichts drückt oder verrutscht.

Angenehme Textil-Kopfbänderung

Die Kopfbänderung der JULIA-Familie sorgt für einen stabilen Sitz der Maske und bietet dank der weichen, hautfreundlichen Materialien gleichzeitig ein angenehmes Gefühl auf der Haut. Über die oberen Klettzungen lässt sich der Kippwinkel auf dem Nasenrücken zudem optimal einstellen.

Intuitiv bedienbar und flüsterleise


Die JULIA-Familie wurde für eine einfache Handhabung im Alltag entwickelt. Der Verschluss lässt sich schnell und intuitiv bedienen. Für eine ruhige Nacht sorgt zudem das bewährte Ausatemsystem, das die Atemluft leise und diffus ableitet.

Made in
Germany





Die kleine Freiheitsliebende.

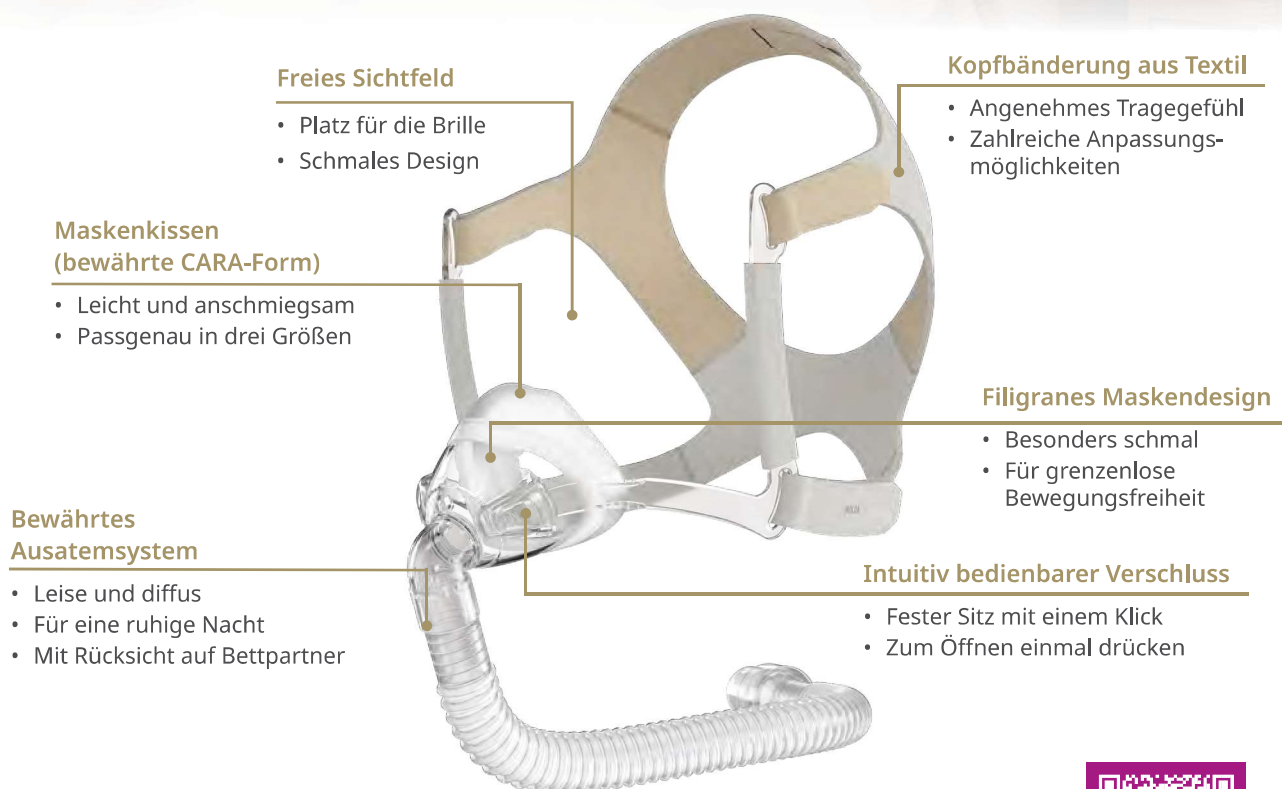

JULIA
online ansehen →



Die große Freiheitsliebende.

Freies Sichtfeld

- Platz für die Brille
- Kleineres Design

Maskenkissen (bewährte LENA-Form)

- Doppellippe dichtet sehr gut ab
- Keine Druckstellen durch Luftkisseneffekt
- Passgenau in drei Größen

Bewährtes Ausatemsystem

- Leise und diffus
- Für eine ruhige Nacht
- Mit Rücksicht auf Bettpartner

Kopfbänderung aus Textil

- Angenehmes Tragegefühl
- Zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten

Kugelgelenk mit 360° und 3D-Drehung

- Besonders flexibel
- Für grenzenlose Bewegungsfreiheit

JULIA Full Face
online ansehen →



JULIA

Die Nachhaltigen.

Ressourcenschonend verarbeitet

Bei der Kopfbänderung dieser Maskenfamilie ist uns eine nachhaltige Verbesserung gelungen, die den Wasser-, Energie- und Chemikalienverbrauch deutlich reduziert. Wir sind nun in der Lage, die Faserproduktion und den Färbeprozess so zu kombinieren, dass der zusätzliche Färbeprozess vollständig entfällt.

Mit nachwachsenden Rohstoffen

Die Verpackung der JULIA-Masken besteht zu 80 % aus dem nachwachsenden Rohstoff Zuckerrohr.


Einfach zu recyceln

Die Bestandteile der JULIA-Masken sind fast ausschließlich so gestaltet, dass sie sortenrein recycelt werden können. In der Herstellung vermeiden wir Materialmischungen, damit sich die Masken am Ende ihres Lebenszyklus problemlos in den Wertstoffkreislauf zurückführen lassen.

JULIA schafft mehr.

Mehr Freiheit und mehr Raum für Träume.

Dadurch werden folgende Einsparungen erzielt¹:

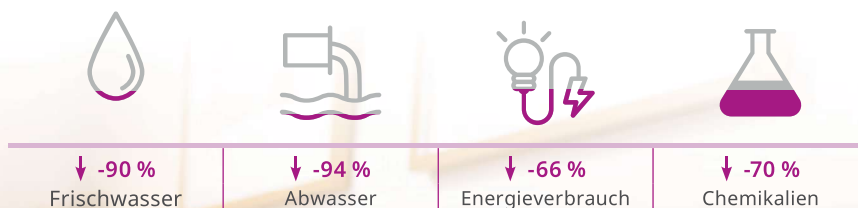

¹ Vom Hersteller ermittelte Werte

Ersatzteile



**Kopfbänderung
JULIA**
inkl. Bänderungsclips
standard: LMT 26856
large: LMT 26949



**Kopfbänderung
JULIA Full Face**
inkl. Bänderungsclips
standard: LMT 26660
large: LMT 26661



**Maskenkissen
JULIA**
Gr. S: LMT 26636
Gr. M: LMT 26637
Gr. L: LMT 26638



**Maskenkissen
JULIA Full Face**
Gr. S: LMT 26602
Gr. M: LMT 26603
Gr. L: LMT 26604



**Maskenschlauch
mit Anschlüssen**
LMT 26713



Überzieher 2 Stk.
LMT 17830

Weitere Informationen zu unseren Therapielösungen, Zubehör und Maskensystemen finden Sie unter loewensteinmedical.com

Technische Daten

	JULIA	JULIA Full Face		JULIA	JULIA Full Face
Produktklasse nach Verordnung MDR (EU) 2017/745	II a	II a	Strömungswiderstand • bei 50 l/min • bei 100 l/min	0,6 hPa 2,3 hPa	0,5 hPa 0,8 hPa
Abmessungen (B x H x T)	53 x 61 x 75 mm (Größe S) 58 x 60 x 76 mm (Größe M) 62 x 64 x 77 mm (Größe L)	103 x 99 x 104 mm (Größe S) 105 x 111 x 104 mm (Größe M) 106 x 122 x 103 mm (Größe L)	Strömungswiderstand Notfallausatemventil Toleranz: ± 0,2 hPa • Inspiration bei 50 l/min • Expiration bei 50 l/min	- -	0,6 hPa 0,6 hPa
Gewicht	77 g (Größe S) 78 g (Größe M) 80 g (Größe L)	104 g (Größe S) 107 g (Größe M) 116 g (Größe L)	Angegebener Zweizahl- Geräusch-Emissionswert nach ISO 4871: • Schalldruckpegel: • Schallleistungspegel: • Unsicherheitsfaktor:	18 dB(A) 26 dB(A) 3 dB(A)	19 dB(A) 27 dB(A) 3 dB(A)
Totraumvolumen	68 ml (Größe S) 78 ml (Größe M) 92 ml (Größe L)	217 ml (Größe S) 250 ml (Größe M) 288 ml (Größe L)	Schaltdruck AAV • Öffnen • Schließen	- -	< 4,0 hPa < 4,0 hPa
Therapiedruckbereich	4 hPa – 30 hPa	4 hPa – 35 hPa	Lebensdauer	5 Jahre	5 Jahre
Schlauchanschluss: Konus nach EN ISO 5356-1	Ø 22 mm (männl.)	Ø 22 mm (männl.)	Gebrauchsdauer	bis zu 12 Monate ¹	bis zu 12 Monate ¹
Temperaturbereich • Betrieb • Lagerung und Transport	+5 °C bis +40 °C -20 °C bis +70 °C	+5 °C bis +40 °C -20 °C bis +70 °C	Angewandte Normen	EN ISO 17510: 2020	EN ISO 17510: 2020

¹ Die Gebrauchsdauer ist abhängig von der Reinigung und der verwendeten Reinigungsmittel, von der täglichen Tragedauer, vom Therapiedruck und von der individuellen Schweißsekretion. Die Nutzung des zweiten Maskenkissens (optional enthalten) verlängert nicht die Gebrauchsdauer.

CE 0197

Gerätebezeichnung	Gr.	Artikel-Nr.	HMV-Pos.-Nr.	Gerätebezeichnung	Gr.	Artikel-Nr.	HMV-Pos.-Nr.
JULIA	S	LMT 26710	14.24.16.2089	JULIA Full Face	S	LMT 26740	in Beantragung
inkl. 2. Maskenkissen	S	LMT 26710-1000*	14.24.16.2091	inkl. 2. Maskenkissen	S	LMT 26740-1000*	in Beantragung
JULIA	M	LMT 26720	14.24.16.2089	JULIA Full Face	M	LMT 26750	in Beantragung
inkl. 2. Maskenkissen	M	LMT 26720-1000*	14.24.16.2091	inkl. 2. Maskenkissen	M	LMT 26750-1000*	in Beantragung
JULIA	L	LMT 26730	14.24.16.2089	JULIA Full Face	L	LMT 26760	in Beantragung
inkl. 2. Maskenkissen	L	LMT 26730-1000*	14.24.16.2091	inkl. 2. Maskenkissen	L	LMT 26760-1000*	in Beantragung

* 2. Maskenkissen derselben Größe im Lieferumfang enthalten

**Made in
Germany**



Gedruckt auf
100 % recyceltem Papier



Löwenstein Medical Technology
Kronsaalsweg 40
22525 Hamburg, Deutschland

Vertrieb + Service
Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems, Deutschland
T. +49 2603 9600-0
F. +49 2603 9600-50
info@loewensteinmedical.com
loewensteinmedical.com

Menschen im Mittelpunkt

© Urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung jeder Art nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch Löwenstein Medical.
Alle Angaben aus drucktechnischen Gründen ohne Gewähr.

